


# GUIDE DE CHARGEMENT D'UN FAUTEUIL ROULANT DANS UN VÉHICULE

**CES AIDES TECHNIQUES PERMETTENT DE CHARGER CERTAINS FAUTEUILS ROULANTS MANUELS (PLIANTS OU RIGIDES) DANS CERTAINES VOITURES. IL PEUT TOUTEFOIS ÊTRE NÉCESSAIRE D'ENLEVER LES ROUES ARRIÈRE.**

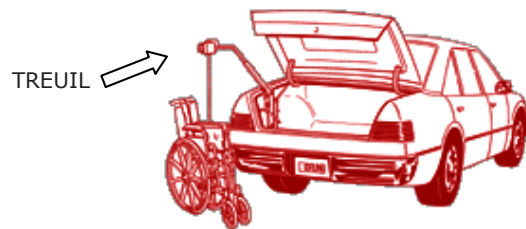

Pour savoir si ces adaptations seraient pertinentes pour vous, vous devez vous renseigner auprès du programme Conduite automobile et adaptation de véhicule.

## **CENTRE DE RÉADAPTATION CONSTANCE-LETHBRIDGE**

7005, boulevard de Maisonneuve Ouest  
Montréal (Québec) H4B 1T3

## **Point de services de l'Ouest de l'Île**

16777, boulevard Hymus  
Kirkland (Québec) H9H 3L4




Adapté du *Guide sur les transferts à l'auto* de l'ASSTSAS

## CHARGEMENT D'UN FAUTEUIL ROULANT


Embarquer un fauteuil roulant (FR) dans un véhicule est une activité risquée pour le dos en raison du poids, des dimensions et de la forme du fauteuil roulant.

## PRÉPARATION D'UN FAUTEUIL ROULANT

Pour diminuer le poids et l'encombrement du FR il est nécessaire de retirer les composantes amovibles du FR, soit les appuis-pieds, le coussin et les roues.

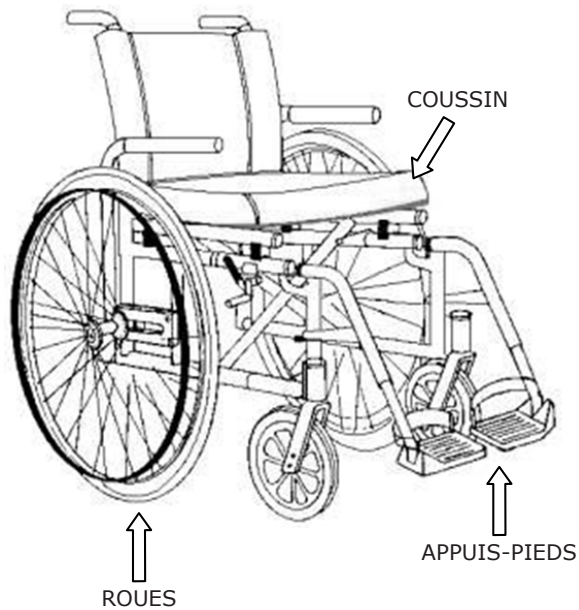


De plus, si votre fauteuil est pliant, vous devrez le plier avant le début du chargement. Pour savoir comment plier le FR, référez-vous au guide du FR ainsi qu'aux instructions remises à la livraison.

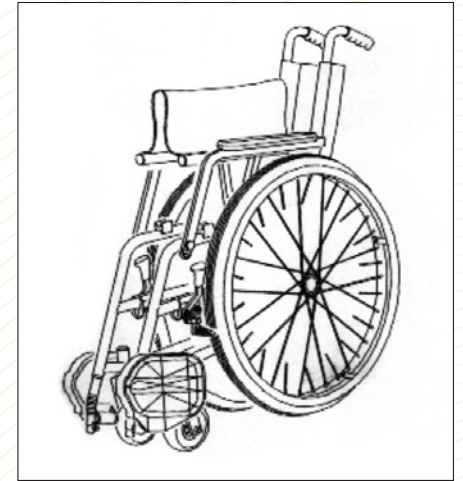


## CHARGEMENT DANS LE COFFRE ARRIÈRE

- Mettre une couverture pour protéger la peinture du véhicule
- Plier les genoux et rapprocher le fauteuil vers soi.



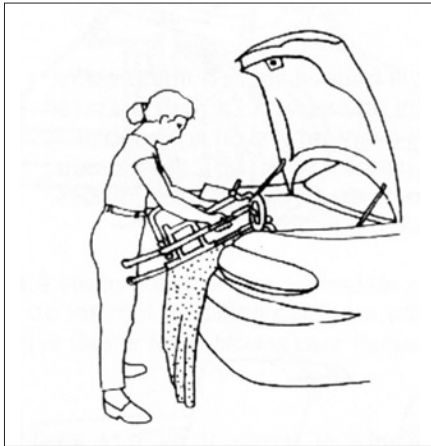

- Déplier les genoux pour soulever le fauteuil et l'appuyer sur le rebord du coffre

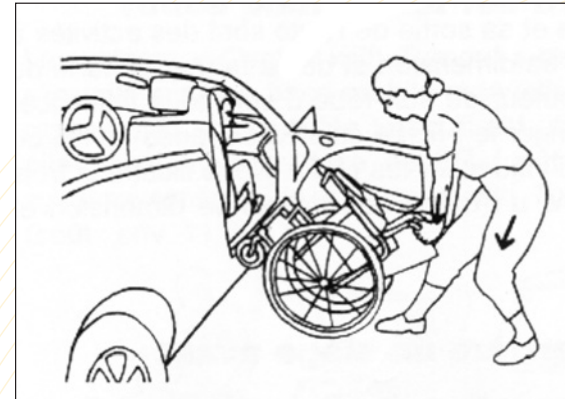

## CHARGEMENT À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE

### Par une personne aidante :

- Le client aidé est déjà assis sur le siège du passager
- Avancer son siège passager au maximum
- Au besoin, incliner son dossier vers l'avant
- Protéger le banc arrière à l'aide d'une couverture
- Retirer les appuis-pieds et le coussin
- Retirer les anti-basculants
- Basculer le FR sur ses roues arrière en pliant les genoux et en gardant le dos droit
- Entrer les petites roues dans le véhicule
- Lorsque les petites roues du FR sont à l'intérieur, le faire rouler derrière le siège en s'avançant.



- Pousser pour glisser le fauteuil dans le coffre
- Mettre les roues, appuis-pieds et coussin dans le coffre, entrer la couverture et le tour est joué!

## Par le client :

- Transférer au siège conducteur
- Retirer les roues, appuis-pieds et coussin du FR et placer ces composantes sous le siège passager.
- Soulever le cadre du FR et le placer sur le siège passager avant ou sur la banquette arrière.
- Utiliser la ceinture de sécurité du véhicule pour stabiliser le châssis de votre FR durant les déplacements routiers.



## ADAPTATIONS DE VÉHICULE

Il existe des adaptations qui s'installent sur votre véhicule et qui peuvent vous aider à embarquer votre fauteuil roulant.

### SYSTÈME DE CHARGEMENT SUR LE TOIT

Ces systèmes s'installent sur le toit de certaines voitures et peuvent, via un levier électrique, charger certains fauteuils roulants manuels pliants.

