


MISE EN MODE MANUEL

Pour désactiver les moteurs c'est-à-dire pour qu'une personne puisse pousser le fauteuil roulant, il suffit d'abaisser les leviers jaunes situés de chaque côté des roues arrières du fauteuil. Pour activer les moteurs à nouveau, il faut tirer les leviers jaunes vers le haut.

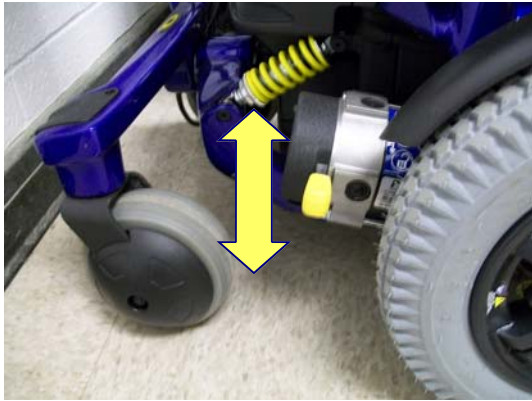

au fauteuil motorisé, il est important à plusieurs de s'assurer que le transfert se fera de façon sécuritaire.

1. Tout d'abord, **le fauteuil devrait toujours être éteint** lorsque vous souhaitez vous y asseoir ou vous en relever.
2. Avant de se lever, assurez-vous que la ceinture de sécurité est détachée.
3. Les **appui-pieds devraient être escamotés** afin de libérer l'espace devant vous. Pour ce faire, appuyez sur les leviers gris situés sur le côté externe des appuis-pieds et poussez ceux-ci vers l'extérieur.



Si le boîtier de contrôle vous gêne lors de votre transfert, il est également possible de l'escamoter. Pour ce faire, il suffit de pousser sur le support du boîtier de contrôle à l'intérieur et de pousser le boîtier vers l'extérieur. Pour le ramener, il suffira de le pousser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

Q 6000

FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ



Centre de réadaptation
Constance-Lethbridge

7005, De Maisonneuve Ouest.

Montréal, Québec

H4B 1T3

MISE EN MARCHÉ DU FAUTEUIL

Afin de mettre le fauteuil en marche, il faut pousser vers le haut la manette située à gauche du boîtier de contrôle. L'écran couleur s'allumera et le fauteuil sera alors prêt à fonctionner.

ARRÊT DU FAUTEUIL

Pour éteindre le fauteuil, il suffit de pousser la même manette vers le bas.



KLAXON

Le bouton jaune situé sous l'écran est utilisé pour klaxonner.

VARIATION DE VITESSE AVEC LA MANETTE

En appuyant délicatement sur la manette, le fauteuil avancera doucement, alors qu'en poussant au maximum, la vitesse augmen-



tera.

PROFIL

Le fauteuil Q 6000 possède 5 profil. Chacun d'entre eux est représenté par la lettre 'P' (profil). Donc, au premier

CHANGEMENT DE PROFIL

Pour effectuer un changement de profil, il faut pousser vers le haut la manette située à gauche du boîtier de contrôle.



POTENTIOMÈTRE

La vitesse peut également être ajustée en tournant la manette située à droite du boîtier de contrôle. Le potentiomètre permet de graduer chacune des 5 vitesses du fauteuil.

En le tournant vers le bas, on diminue la vitesse et en le tournant vers le haut, on l'augmente.

INDICATEUR DE CHARGE

La série de voyants lumineux indiquant la charge de l'appareil est située dans le haut de l'écran. Il s'agit d'une série de carrés verts placés en demi-cercle au-dessus de l'icône représentant la batterie. Quand la charge diminue les carrés verts perdent leur couleur. De plus, un indicateur numérique affiche le pourcentage de charge restant à l'intérieur de l'icône représentant la batterie.

RECHARGER LA BATTERIE

Lorsque la moitié des carrés verts de l'indicateur de charge ont perdus leur couleur, il est temps de recharger la batterie. Pour ce faire, il suffit de brancher au mur le fil situé au dos de l'appareil.

